

**Zimmer**  
MedizinSysteme


**FREI**  
**SWISS**




Zimmer

**PhySys**

Hochwirksame Therapie ohne Nebenwirkungsproblematik

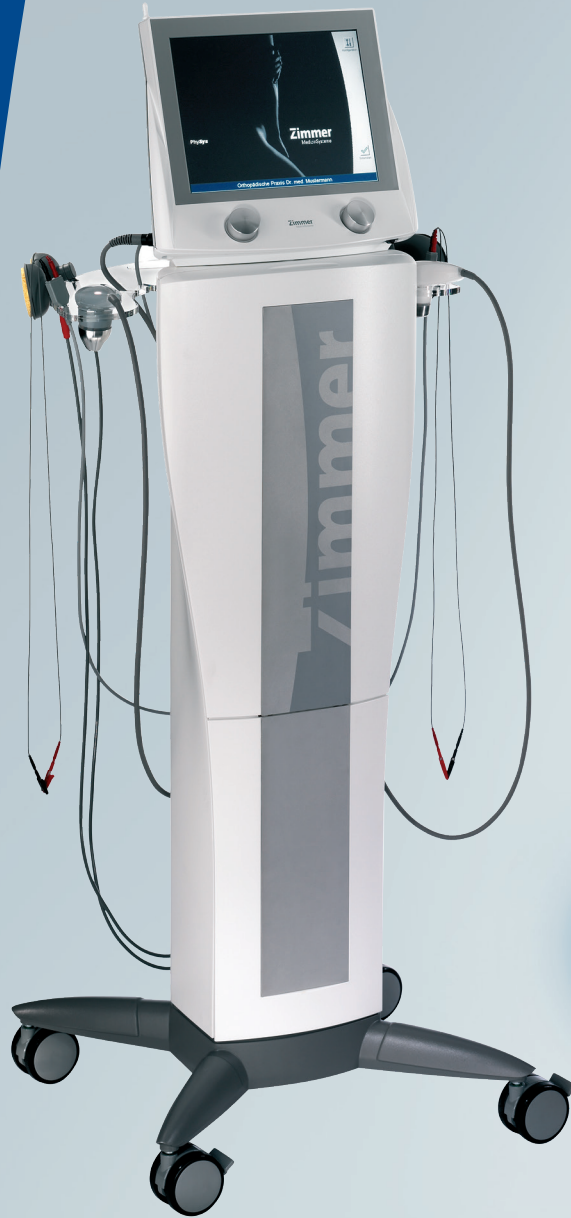

PhyxSys

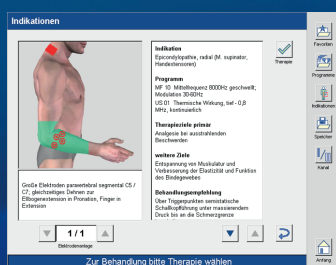

**Die Therapie mit PhySys beruht auf wissenschaftlich fundierten physiologischen Wirkungsweisen.**

Sie kann damit eine zeitgemäße und wichtige Säule Ihres Behandlungsangebotes sein.

Im Mittelpunkt der Anwendung stehen schmerzhafte Erkrankungen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates.



**Nur 1 Fingerdruck zur Therapie = Motivation pur für den Therapeuten**

Den Startbildschirm können Sie nach Ihrer Wahl konfigurieren:

- als persönliche Favoritenliste für den Therapie-Sofortstart
- als Programmliste nach Wirkungsweisen
- als Programmliste nach klassischer Bezeichnung
- nach Körperregionen oder Indikationen mit professioneller Anwenderinformation

# Ultraschalltherapie bekommt eine neue Dimension



# Ultraschalltherapie

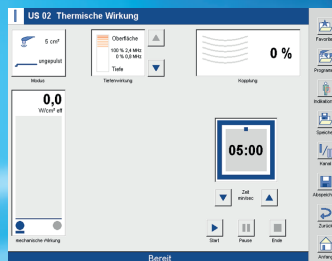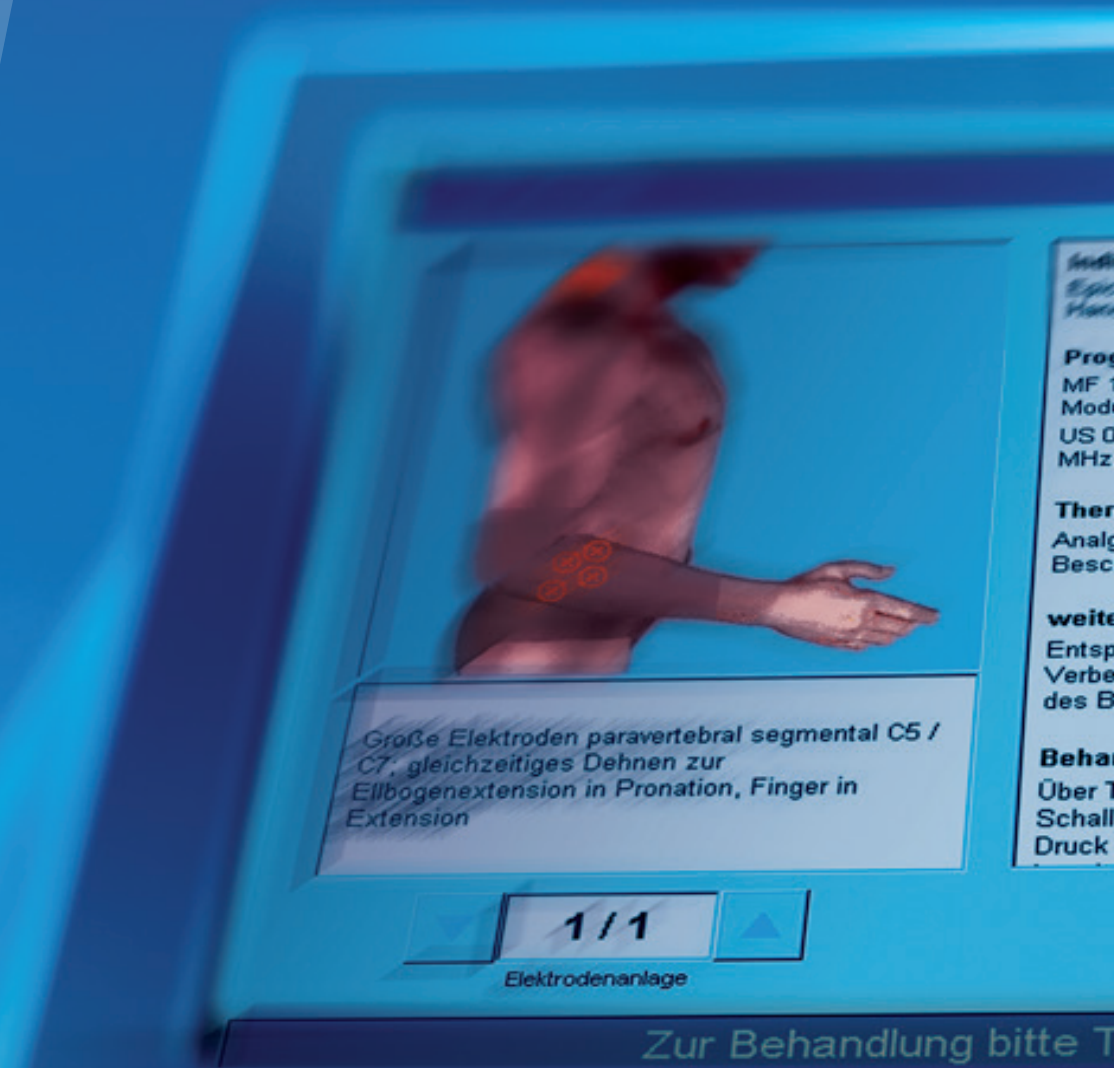

## Die neue Ultraschalltherapie

Ultraschalltherapie wirkt einerseits durch lokalisierte Wärme und andererseits durch „Mikromassage“ auf zellulärer Ebene. Beide Wirkungsformen lassen sich jetzt indikationsbezogen getrennt dosieren.

Auch die Eindringtiefe der Ultraschallenergie ist frei wählbar. Damit können Sie jetzt Ihren Therapieansatz nach Ihrer Entscheidung fokussieren auf Analgesie, Hyperämie oder Heilungsbeschleunigung durch Stoffwechselstimulation.

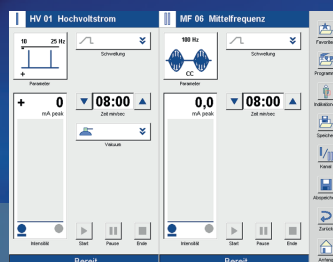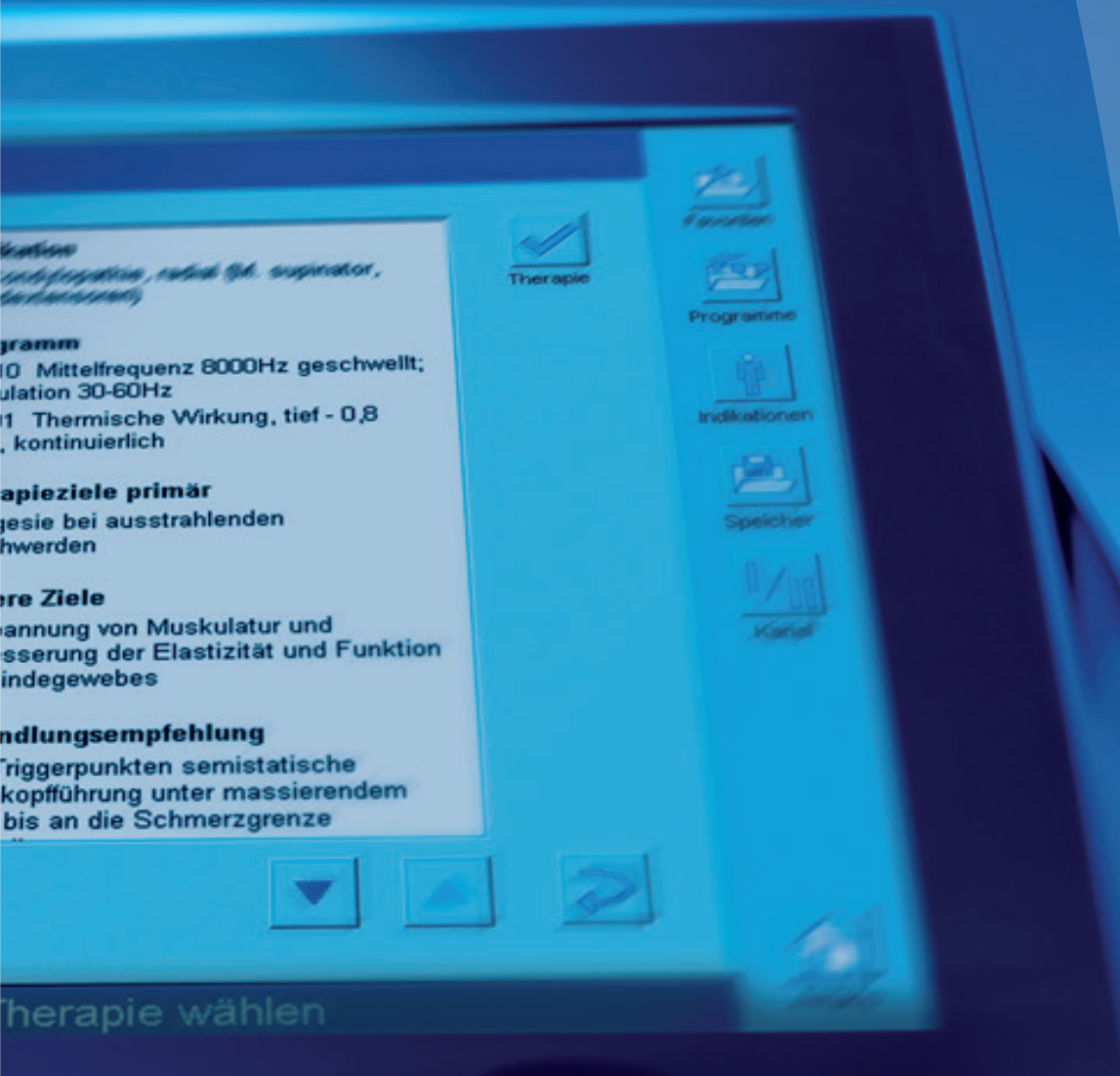

## PhySys Elektrotherapie

PhySys bietet das gesamte Spektrum der modernen Elektrotherapie. Professionelle indikationsbezogene Anwenderinformationen auf neuestem wissenschaftlichen Stand, übersichtlich dargestellt, unterstützen Sie beim Einsatz dieses wertvollen Instrumentes.

## Simultanverfahren

Der kombinierte Einsatz von Ultraschall und Reizstrom wirkt hoch-effizient in der Behandlung von Funktionsstörungen, z.B. im Zusammenhang mit myofaszialen Schmerzsyndromen. Eine Reihe von Möglichkeiten sind als private Gesundheitsleistungen anbietbar.



## Therapieimpressionen für Patienten

- Design-Ästhetik als Wohlfühlelement
- Hochtechnologie in humaner Dimension
- Vertrauen in zeitgemäßes Therapieangebot
- Zufriedene Patienten als Referenz für die Praxis



# Therapieimpressionen



Zimmer MedizinSysteme GmbH  
 Junkersstraße 9  
 89231 Neu-Ulm, Germany  
 Tel. +49. (0)7 31. 97 61-0  
 Fax +49. (0)7 31. 97 61-118  
 info@zimmer.de  
 www.zimmer.de

## Technische Daten

### Elektrotherapie

Anzahl Kanäle	2, komplett unabhängig (Intensität und Parameter)
2-Kanal Synchronisation	Parallel / Alternierend
Kanal Auswahl	Monostim / 1 Programm - 1 Kanal TwinStim / 1 Programm - 2 Kanäle DuoStim / 2 Programme - 2 Kanäle
Interner Kanalwechsel	Ja
Stromformen / Programme	Galv., Diadynamische Ströme, MF, Interferenz
Sport Rehabilitation	Sequenzprogramme mit automatischer Steuerung von Aufwärmphase, Trainingsphase und Entspannungsphase
Programmwahl	wirkungs- oder parameterbezogen, indikationsbezogen, Stromform-Gruppen / analog Galva 5 oder Wirkungsweisen
Parameter	individuell veränderbar
Programm-Speicher	je 120 Einträge in der Speicher-, Favoriten- und Diagnostikliste
Individuelles Datenmanagement	komfortabel über SD-Karte

### Ultraschall

Ultraschallköpfe	Mehrfrequenz-Kopf mit 2 Frequenzen
Frequenzen	0,8 MHz, Tiefenwirkung 2,4 MHz, Oberflächenwirkung
Maximale Leistungsabgabe	3W/cm <sup>2</sup>
Eindringtiefe	wählbar
Wirkungsweisen	Wärmewirkung und Mikromassage getrennt dosierbar
Koppelung	Audio und optische Anzeige am Kopf

### Simultananwendung

Voreingestellte Programme nach gewünschter Wirkung oder individuell wählbar

### Vakuum

Nur in Verbindung mit Säule

Anwendungsmöglichkeiten	Kontinuierlich / Gepulst
Vakuum Stärke	frei regelbar
Steuerung	Über den Touch-Bildschirm

### Optionen

- Säule
- Halter für US-Köpfe und Gel
- Schwenkfuß

### Maße

PhySys ohne Säule	H 30 x B 35 x L 20 cm
PhySys mit Säule	H 138 x B 53 x L 52 cm

